

**KITTOS**countryplus



La primera silla  
eléctrica plegable,  
se actualiza con  
la nueva Kittos  
Country Plus

## Kittos Country Plus

Silla de ruedas  
eléctrica plegable

**FICHA TÉCNICA**

más de 50 años viviendo sin límites

**! Nota importante**

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

**www.totalcare-europe.com**



# KITTOScountryplus



## SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE DE ALUMINIO CON AMORTIGUACIONES

La primera silla de ruedas eléctrica plegable del mercado y líder en ventas durante 10 años, Kittos Country, se reinventa con la nueva Kittos Country Plus.

Fabricada en aluminio, combina ligereza y resistencia: pesa solo 25 kg y soporta hasta 180 kg. Incorpora dos potentes motores de 250 W que alcanzan una velocidad máxima de 7,2 km/h y ofrece varias opciones de batería, desde 12 Ah hasta 45 Ah, con una autonomía de hasta 50 km.

La silla Kittos Country Plus reúne todas las prestaciones de la mejor silla del mercado y las eleva con mejoras en amortiguación, electrónica y motores, entre otros avances.

## INFORMACIÓN GENERAL

### Medidas

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Ancho total                         | 61 cm       |
| Profundidad sin reposapiés          | 76 - 79 cm* |
| Profundidad con reposapiés          | 96 - 99 cm* |
| Alto total                          | 93 - 108 cm |
| Alto del asiento al suelo sin cojín | 44          |
| Alto del asiento al suelo con cojín | 51          |

\*Profundidad regulable gracias a las ruedas antivuelco

### Medidas plegada

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Profundidad plegada | 40 cm |
| Ancho plegada       | 61 cm |
| Alto plegada        | 74 cm |

### Peso

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Peso total (sin batería)          | 25 kg    |
| Peso total (con batería de 12 Ah) | 26,60 kg |
| Peso total (con batería de 20 Ah) | 27,50 kg |
| Peso total (con batería de 30 Ah) | 28,90 kg |
| Peso total (con batería de 45 Ah) | 30,60 kg |
| Peso máximo soportado             | 180 kg   |

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Aluminio |
|----------|----------|

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Color | Gris y negro mate |
|-------|-------------------|

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Asiento

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Ancho del asiento        | 45 cm |
| Ancho útil para sentarse | 50 cm |
| Profundidad del asiento  | 48 cm |

### Motor

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor              | 2 x 250 W                                                                          |
| Batería            | 12 Ah / 20 Ah / 30 Ah / 45 Ah (litio)                                              |
| Número de baterías | 1                                                                                  |
| Autonomía          | 10 - 15 km (12 Ah) / 20 - 25 km (20 Ah)<br>30 - 35 km (30 Ah) / 45 - 50 km (45 Ah) |

### Velocidad máxima

7,2 km/h

### Reposabrazos

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Largo del reposabrazos      | 33 cm                                 |
| Ancho del reposabrazos      | 6 cm                                  |
| Tipo de reposabrazos        | Abatibles / Regulables                |
| Regulación del reposabrazos | 3 cm en altura y 10 cm en profundidad |

### Respaldo

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Ancho del respaldo                                 | 45 cm                      |
| Alto del respaldo                                  | 50 - 65 cm                 |
| Tipo del respaldo                                  | Regulable con tres cinchas |
| Reclinación respaldo (Kittos Country Plus Comfort) | 90° - 160° (manual)        |

### Ruedas

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Medidas ruedas delanteras | Ø19 cm  |
| Medidas ruedas traseras   | Ø31 cm  |
| Ancho ruedas delanteras   | 5 cm    |
| Ancho ruedas traseras     | 6 cm    |
| Tipo de ruedas            | Macizas |

### Otras características

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Altura máxima bordillos      | 5 cm                      |
| Bolsa del respaldo           | 40 x 23 cm                |
| Cinturón de seguridad        | Sí                        |
| Claxon                       | Sí                        |
| Máxima pendiente de escalada | 15°                       |
| Plataforma del reposapiés    | Regulable en tres niveles |
| Radio de giro                | 120 cm                    |
| Ruedas antivuelco            | Sí (extraíbles)           |
| Tipo de frenos               | Electromagnéticos         |

\*Antes de contratar un vuelo, le recomendamos que se comunice con la aerolínea para confirmar si permiten sillas de ruedas eléctricas con baterías.





# SEGUIMOS MARCANDO EL CAMINO.



PIONERA. LÍDER. INIGUALABLE. **NUEVA KITTOS COUNTRY PLUS**



**LA SILLA QUE ABRIÓ CAMINO, SIEMPRE UN PASO POR DELANTE**



## LA SILLA ELÉCTRICA PLEGABLE MÁS VENDIDA, SE RENUEVA: NUEVA KITTOS COUNTRY PLUS

La silla Kittos Country, lanzada en 2015 como la primera silla eléctrica plegable de España, se convirtió en un éxito de ventas. Hoy, tras una década liderando el mercado, evoluciona a la nueva Kittos Country Plus que incorpora mejoras en diseño, prestaciones y acabados.

### KITTOS COUNTRY

MODELO ANTERIOR  
DISPONIBLE DE  
2015 A 2025



### KITTOS COUNTRY PLUS

NUEVO MODELO  
DISPONIBLE DESDE  
SEPTIEMBRE DE 2025



### ✓ MÁS LIGERA

La nueva Kittos Country Plus pesa 25 kg frente a los 27 kg del modelo anterior, resultando notablemente más ligera y acorde a las necesidades actuales.

### ✓ MÁS COMPACTA

Su diseño optimizado reduce el ancho total a 61 cm frente a los 64 cm de la Kittos Country, facilitando el acceso y la maniobrabilidad en espacios reducidos.

### ✓ MÁS RESISTENTE

Fabricada en aluminio reforzado, la Kittos Country Plus soporta hasta 180 kg, superando los 150 kg del modelo anterior y ofreciendo mayor durabilidad y seguridad.



### ✓ MÁS CÓMODA

Las nuevas amortiguaciones en las ruedas delanteras ofrecen una conducción más suave y confortable, incluso en superficies irregulares y permiten superar bordillos de 5 cm.

### ✓ MÁS POTENTE

Equipada con motores de mayor rendimiento, electrónica de última generación y un joystick mejorado, ofrece una respuesta más precisa, eficiente y fiable.

### ✓ MÁS MODERNA

Diseño renovado y acabados contemporáneos que le dan un estilo elegante y actual, con reposabrazos regulables, pantalla TFT y otros detalles de última generación.



## ACCESORIOS

COMPLETE SU KITTOS COUNTRY CON LA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS



**Mando acompañante bluetooth**  
Ref: ACMANDOTRASINCAKICOU



**Soporte mando acompañante**  
Ref: ACSOPACOMPAÑANTE



**Porta botellas**  
Ref: ACKITCOU+PORTABOTELL



**Porta vasos**  
Ref: ACKITCOU+PORTAVASOS



**Porta bastón**  
Ref: ACKITCOU+PORTABASTON



**Espejo retrovisor**  
Ref: ACKITCOU+RETROVISOR



**Soporte para teléfonos**  
Ref: ACKITCOU+SOPORTELEFO



**Neo Cushion**  
Ref: TCOJVISCONEO



**Reposapiés individuales**  
Ref: ACKITCOU+REPIND



**Reposapiés individuales elevables**  
Ref: ACKITCOU+REPINDEL



**Reposacabezas**  
Ref: ACKITCOU+CABEZAL



**Base rígida**  
Ref: ACKITCOU+BASERIGIDA



**Lightcare®**  
Ref: ACLIGHTCARE



**Bolsa lateral**  
Ref: ACBOLSALATERALSILLA



**Respaldos anatómicos NXT™**  
Ref: TRCLASSIC



### KITTOS COUNTRY PLUS CONFORT CON RESPALDO RECLINABLE HASTA 160°

Esta versión incluye un pistón hidráulico que facilita la inclinación manual del respaldo, ajustable de 90 a 160°.



DESCUBRA LA ÚLTIMA INNOVACIÓN  
DE IM BY TOTALCARE EUROPE

## KITTOS COUNTRY PLUS: LA VERSIÓN MEJORADA, DE LA SILLA MÁS VENDIDA.



### RESPALDO REGULABLE

El respaldo se ajusta en altura hasta 15 cm y cuenta con tres cinchas tensoras para regular su tensión.




### REPOSABRAZOS REGULABLES Y ABATIBLES

Los reposabrazos se ajustan fácilmente en altura y profundidad y además son abatibles y ergonómicos.



### PLEGADO FÁCIL Y RÁPIDO

La Kittos Country Plus se pliega con facilidad accionando la pestaña trasera, en menos de 5 segundos, la silla está lista para transportar o guardar.

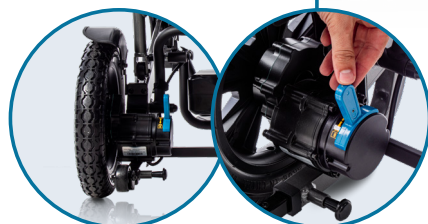

### PALANCAS DE DESCONEXIÓN DEL MOTOR

Los dos motores de 250W cuentan con palancas que permiten su desconexión. Al liberar el motor, la silla de ruedas puede desplazarse sin resistencia.



### ANTIVUELCOS ABATIBLES

Las ruedas antivuelco se ajustan fácilmente en profundidad, pudiendo ocultarlas para reducir el largo total de la silla a 76 cm.



### PLATAFORMA REGULABLE

La altura del reposapiés se ajusta en tres posiciones para adaptarse a las necesidades del usuario. Además, es plegable y está fabricada en aluminio.



### JOYSTICK AJUSTABLE Y TOMA DE CARGA

La carga puede realizarse tanto desde el joystick como desde la batería.



### CESTA GUARDAOBJETOS

El respaldo incluye una bolsa guardaobjetos de 40 x 23 cm.



### COJÍN ERGONÓMICO Y FUNDAS EXTRAÍBLES

Incluye un cojín ergonómico de 7 cm de grosor. Todas las fundas son extraíbles y lavables para mayor comodidad e higiene.



### BATERÍA DE FÁCIL EXTRACCIÓN

La Kittos Country Plus ofrece cuatro opciones de batería de litio: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah y 45 Ah. Gracias a su sistema de extracción rápida, la batería se retira de manera sencilla y sin complicaciones.



### AMORTIGUACIÓN DELANTERA

Las ruedas delanteras incorporan un sistema de amortiguación que mejora significativamente la comodidad durante la conducción, absorbiendo las irregularidades del terreno.



# KITTOS

## SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS PLEGABLES

Nº1 EN VENTAS EN ESPAÑA



**KITTOS**  
COMPLET

**KITTOS**countryplus



**KITTOS**cityplus



**KITTOS**carbon



**KITTOS**magnesium



LA FAMILIA DE SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS PLEGABLES  
MÁS COMPLETA Y VENDIDA DEL MERCADO